

Informations de Commande*

ENDORAIL SYSTEM

RÉFÉRENCE PRODUIT	CONDITIONNEMENT	DESCRIPTION
ESYSTEMGEN2V01	L'emballage contient 1 équipement réutilisable	Endorail Pièce à main Endorail Trolley

ENDORAIL SET

RÉFÉRENCE PRODUIT	CONDITIONNEMENT	DESCRIPTION
EBOXGEN2V02	L'emballage contient 4 Sets Endorail Jetables	Endorail Cathéter Endorail Seringue Endorail Poudre de fer Perforateur

Compatible avec canal opérateur d'un diamètre égal ou supérieur à 3,2 mm.

Pour plus d'informations sur les indications, les contre-indications, les risques, les avertissements, les précautions et les instructions d'utilisation, consultez l'étiquette du produit et le manuel d'utilisation.

Les produits sont certifiés CE
*Uniquement disponible dans l'UE

Fabriqué par Endostart s.r.l.
Via delle Regioni, 265 50052 Certaldo (FI) Italy
+39 0571 843033 | C.F. 06835050482

ENDO
START

Endostart s.r.l. © All Rights Reserved | B004_REV00

ENDO
RAIL

MAGNETIC BALLOON ENDOSCOPY




Magnetic Balloon Endoscopy

La nouvelle solution pour la coloscopie et l'entérocopie

Aucun coût d'installation
Compatible avec les endoscopes standards
Son utilisation ne nécessite aucune préparation

ENDO
START

Magnetic Balloon Technology

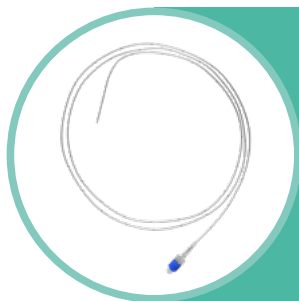

CATHÉTER À BALLONNET À USAGE UNIQUE.

À insérer dans le canal opérateur de l'endoscope et à remplir d'un liquide ferromagnétique.

LE FLUIDE FERROMAGNÉTIQUE EST UN MÉLANGE AQUEUX CONTENANT DE LA POUDRE DE FER BIOCOMPATIBLE.

Il est facilement injecté dans le cathéter pour remplir le ballonnet.



LA PIÈCE À MAIN CONTIENT UN PUISSANT AIMANT.

Grâce à sa conception, il est possible de moduler facilement l'intensité du champ magnétique.

LE TROLLEY ENDORAIL PERMET LE RANGEMENT DE LA PIÈCE À MAIN.

Son design compact permet sa conservation dans la salle d'endoscopie, toujours prêt à l'emploi.



La solution pour la Coloscopie difficile et l'Entéroscopie

FRANCHISSEMENT DES BOUCLES EN COLOSCOPIE

La présence de boucles peut compliquer la coloscopie. Dans ce cas Endorail peut être facilement utilisé avec tout endoscope standard pour faciliter la réalisation de la procédure.



REDUCTION DE BOUCLES: UNE STABILITÉ DISTALE DU COLOSCOPE

L'ablation des polypes du côlon et de l'intestin grêle nécessite un contrôle optimal de l'endoscope.

Endorail facilite le franchissement des boucles, permettant de rétablir un contrôle optimal de l'instrument avant de commencer la polypectomie.

FRANCHISSEMENT DES BOUCLES EN ENTÉROSCOPIE

Au cours de l'entéroscopie, le franchissement des boucles prolonge la durée de l'examen et réduit la profondeur d'insertion de l'entéroscopie. Endorail peut être utilisé tant avec un entéroscopie qu'avec un coloscope pédiatrique pour faciliter l'exploration de l'intestin grêle.

