

Informazioni per l'Ordine*

ENDORAIL SYSTEM

NUMERO D'ORDINE	CONFEZIONE	DESCRIZIONE
ESYSTEMGEN2V01	1 scatola contenente 1 unità riutilizzabile	Endorail Handpiece Endorail Cart

ENDORAIL SET

NUMERO D'ORDINE	CONFEZIONE	DESCRIZIONE
EBOXGEN2V02	1 scatola contenente 4 Endorail Set Monouso	Endorail Balloon Guide Endorail Solution Syringe Endorail Powder Spike

Compatibile con canale operativo di diametro uguale o maggiore di 3,2 mm.

Per maggiori informazioni su indicazioni, controindicazioni, rischi, avvertenze, precauzioni e istruzioni per l'uso consultare l'etichetta del prodotto e il manuale d'uso.

I prodotti sono marcati CE.

*Disponibile soltanto in EU

Fabbricato da
Endostart s.r.l.

Via delle Regioni, 265 50052 Certaldo (FI) Italy
+39 0571 843033 | C.F. 06835050482



Endostart s.r.l. © All Rights Reserved | B001_REV02

ENDO
RAIL 
MAGNETIC BALLOON ENDOSCOPY



Magnetic Balloon Endoscopy

La nuova soluzione per la colonscopia e l'enteroscopia


Nessun costo di installazione

Compatibile con endoscopi standard

Utilizzo al bisogno e senza necessità di pre-caricamento



Magnetic Balloon Technology

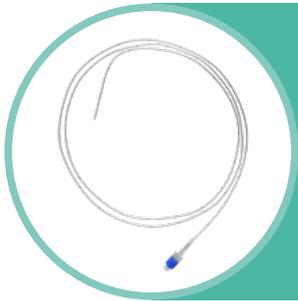

CATETERE A PALLONCINO MONOUSO.

Da inserire nel canale operativo dell'endoscopio e riempire con il Fluido Ferromagnetico.

IL FLUIDO FERROMAGNETICO E' UNA MISCELA ACQUOSA CONTENENTE POLVERE DI FERRO BIOCOMPATIBILE.

Può essere facilmente iniettata nel catetere per gonfiare il palloncino.



IL MANIPOLO CONTIENE UNA POTENTE CALAMITA.

Grazie al suo design è possibile modulare facilmente l'intensità del campo magnetico.



IL CARRELLO ENDORAIL FUNZIONA DA CUSTODIA PER IL MANIPOLO.

Il suo design compatto consente di tenerlo in sala endoscopica pronto all'uso.

Looping in Colonscopia ed Enteroscopia

LOOPING E COMPLETAMENTO DELLA COLONSCOPIA

La presenza di loop può rendere complesso il completamento della colonscopia. Endorail può essere utilizzato al bisogno con un qualunque colonscopio per facilitare il rapido completamento delle colonscopie.



LOOPING E STABILIZZAZIONE DELLA PUNTA

La rimozione dei polipi del colon e dell'intestino tenue richiedono un controllo ottimale dell'endoscopio. Endorail facilita la risoluzione delle loop per recuperare il controllo ottimale dello strumento prima di iniziare la polipectomia.

LOOPING ED ENTEROSCOPIA

Durante l'enteroscopia, le loop allungano la durata della procedura e riducono la profondità di inserimento dell'enteroscopia. Endorail può essere utilizzato sia con un enteroscopia che con un colonscopio per facilitare l'esplorazione dell'intestino tenue.

